



Bagues



Experts in Orthodontics

05

***GC***

## Sommaire Bagues

---

Codification des bagues	129
Bagues molaires Sure-Snap Band	132
Bagues molaires A-Fit Band	133
Bagues prémolaires Sure-Snap Band	134

---





## Bagues

Nous vous proposons deux types de bagues molaires de qualité exceptionnelle, tous deux fabriqués au Japon par Tomy® Inc.

## Codification des bagues

Bagues molaires **Sure-Snap**. Composition de la Référence ?



UL18



SUL26



## Bagues molaires **A-Fit**. Composition de la Référence ?



25UL

**Indique la taille**  
Les tailles vont de 5 à 38

**Désigne l'arcade**  
U Upper (maxillaire)  
L Lower (mandibulaire)

**Désigne le côté**  
L Left (Gauche)  
R Right (Droit)

1SUL

**Indique la taille**  
Les tailles vont de 1 à 32


**Désigne la molaire**  
S veut dire seconde molaire

**Désigne l'arcade**  
U Upper (maxillaire)  
L Lower (mandibulaire)

**Désigne le côté**  
L Left (Gauche)  
R Right (Droit)



## Bagues prémolaires **Sure-Snap**. Composition de la Référence ?

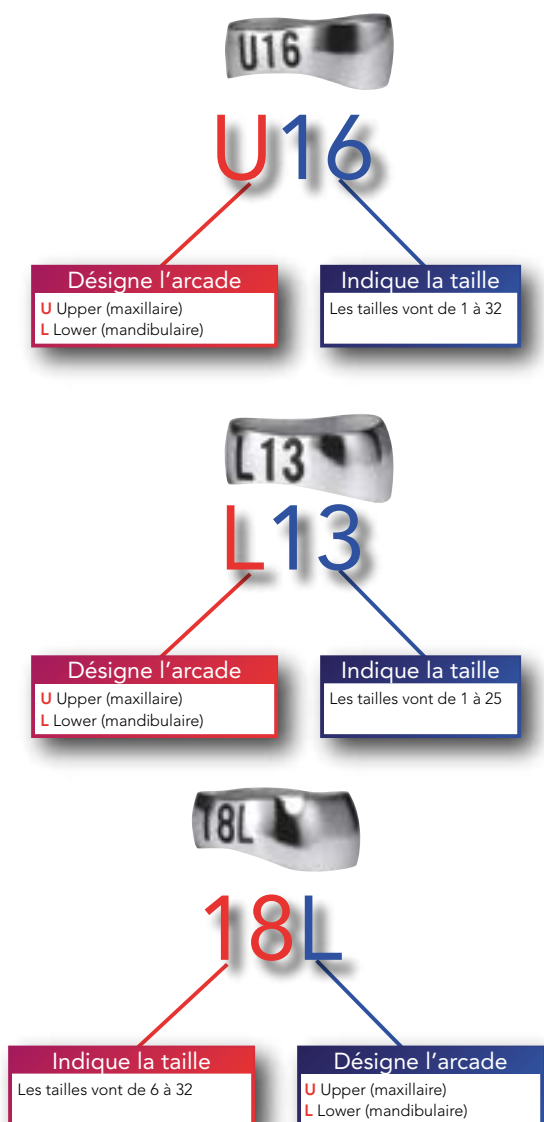



## Bagues molaires Sure-Snap Band

L'alliage qui constitue la Sure-Snap rend cette bague dure et élastique à la fois. La différence d'épaisseur entre le bord occlusal et le bord gingival la rend :

- Résistante à la pression de l'enfonce bague (bord occlusal)
- Suffisamment élastique pour passer le grand contour de la dent sans se déformer (bord gingival).

Vous disposez avec Sure-Snap, d'une forme anatomique pour chaque molaire, d'un marquage permanent bien lisible et d'un intrados traité par électro-soustraction pour une rétention unique.

Elles sont disponibles en 32 tailles pour les 1<sup>ères</sup> molaires, et en 30 tailles pour les 2<sup>èmes</sup> molaires.

### Composition des Kits Sure Snap première molaire - Composition par dent : (SD, SG, ID, IG)

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

### Composition des Kits Sure Snap deuxième molaire - Composition par quadrant : (SD, SG, ID, IG)

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Starter												1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1

#### Première molaire supérieure, bague nue

Kit Starter : 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro : 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard : 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master : 400 Bagues assorties, 32 Tailles

#### Deuxième molaire supérieure, bague nue

Kit Starter : 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro : 100 Bagues assorties, 30 Tailles

Kit Standard : 200 Bagues assorties, 30 Tailles

Kit Master : 400 Bagues assorties, 30 Tailles

#### Première molaire inférieure, bague nue

Kit Starter : 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro : 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard : 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master : 400 Bagues assorties, 32 Tailles

#### Deuxième molaire inférieure, bague nue

Kit Starter : 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro : 100 Bagues assorties, 30 Tailles

Kit Standard : 200 Bagues assorties, 30 Tailles

Kit Master : 400 Bagues assorties, 30 Tailles



## Bagues molaires A-Fit Band

A-Fit Band a toutes les qualités de la Sure-Snap. Ce qui les différencie est une hauteur de couronne plus importante pour l'A-Fit Band et un choix de taille plus important dans les grands numéros. Identification des A-Fit Bands.

### Composition des Kits A-Fit première molaire - Composition par dent: (SD, SG, ID, IG)

Taille	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Starter								1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
Intro	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Standard	1	1	1	2	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Master	2	2	2	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

### Composition des Kits A-Fit deuxième molaire - Composition par dent: (SD, SG, ID, IG)

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1

#### Première molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 34 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 34 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 34 Tailles

#### Deuxième molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 32 Tailles

#### Première molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 34 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 34 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 34 Tailles

#### Deuxième molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master: 400 Bagues assorties, 32 Tailles



## Bagues prémolaires Sure-Snap Band

Ces bagues ont une qualité de fabrication identique à celle de nos bagues molaires.

Leur mise en place se fait par un mouvement de bascule, alternant une pression mésiale et distale. Elles sont disponibles en trois formes anatomiques :

- 1<sup>ère</sup> prémolaire maxillaire (32 tailles)
- 1<sup>ère</sup> prémolaire mandibulaire (25 tailles)
- 2<sup>nd</sup> prémolaire mandibulaire (27 tailles)

Grâce à leur facilité de mise en place, vous n'hésitez plus à les substituer aux brackets lors de rotations trop importantes ou de décollements intempestifs.

### Composition des Kits Sure Snap prémolaires supérieures

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2						
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4

### Composition des Kits Sure Snap 1<sup>ères</sup> prémolaires inférieures

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
Starter			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																	
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2							
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2							
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4							

### Composition des Kits Sure Snap 2<sup>èmes</sup> prémolaires inférieures

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Intro						2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2

#### Prémolaire supérieure, bague nue

Kit Starter : 50 Bagues assorties, 22 Tailles

Kit Intro : 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard : 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master : 400 Bagues assorties, 32 Tailles

#### 1<sup>ère</sup> Prémolaire inférieure, bague nue

Kit Starter : 50 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro : 100 Bagues assorties, 25 Tailles

Kit Standard : 200 Bagues assorties, 25 Tailles

Kit Master : 400 Bagues assorties, 25 Tailles

#### 2<sup>ème</sup> PM inférieure, bague nue

Kit Starter : 50 Bagues assorties, 27 Tailles

Kit Intro : 100 Bagues assorties, 27 Tailles

Kit Standard : 200 Bagues assorties, 27 Tailles

Kit Master : 400 Bagues assorties, 27 Tailles