


Informationen für den behandelnden Arzt

EXPERIENCE™ mini ceramic Brackets bieten die gleichen Vorteile wie EXPERIENCE™ ceramic, jedoch in einer bemerkenswert kleineren Ausführung. Sie bieten somit eine noch ästhetischere Lösung für Ihre Patienten. EXPERIENCE™ mini ceramic Brackets minimieren in der Nivellierungsphase die Friktion und erlauben eine gute Torque- und Rotationskontrolle in der Finishingphase. Alle Slots der EXPERIENCE™ Bracketssysteme werden computergesteuert im CNC Verfahren nachgefräst. Somit übertragen alle EXPERIENCE™ Slots die Torque- und Angulationswerte präzise für ein vorhersehbares Resultat.

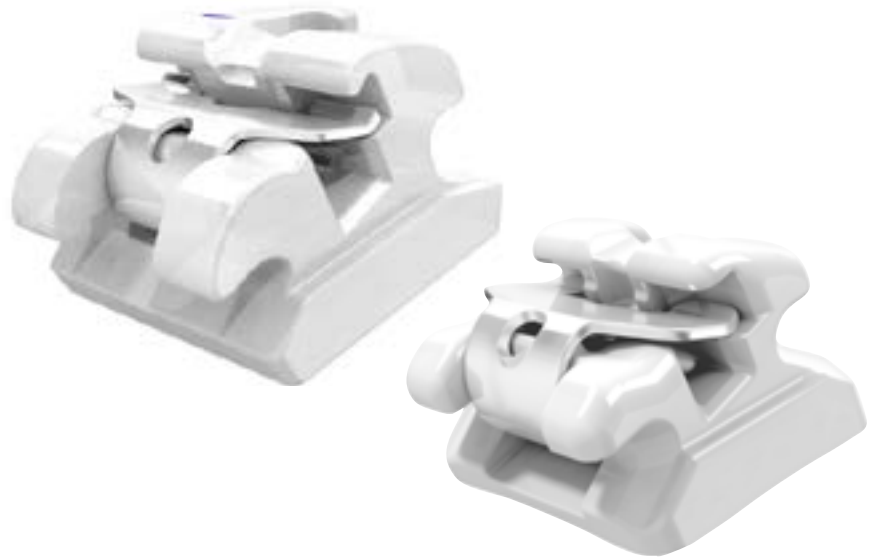

Eigenschaften der selbstligierenden Brackets

- Unvergleichliche Ästhetik
- Erhöhter Patientenkomfort
- Reduzierte Stuhlzeit
- Weniger Behandlungstermine notwendig
- Verkürzte Behandlungszeit
- Verbesserte Mundhygiene

SL Product

Hi Aesthetic

EXPERIENCE™ mini ceramic

Selbstligierende mini Keramikbrackets



passiv



interaktiv



aktiv

Experts in Orthodontics

GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu

EXPERIENCE mini ceramic

Verkleinerte, patientenfreundliche Bracketflügel


um okklusale Interferenzen zu minimieren

Drei sichere Öffnungsvarianten

zum einfachen Öffnen ohne Clipverformung

Keramik-Spritzguss

für Gleichmäßigkeit, Stabilität und Präzision

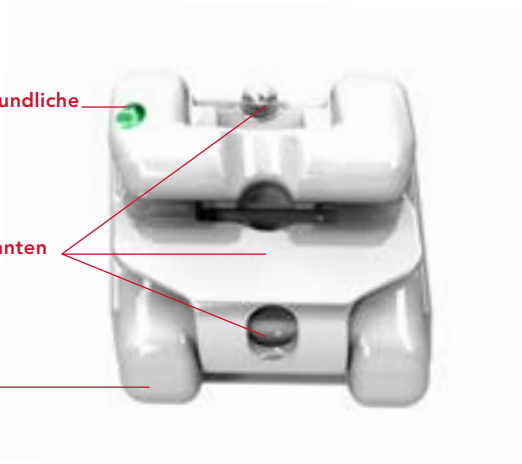

CNC-gefräster Slot

Abgerundete Slotwände

für bogenschonende unterbrechungsfreie Bewegung

Torque in der Basis


Anatomisch gewölbte Basis

für eine optimale Passform

Mechanische Retention

für maximalen Klebeverbund und die optionale Repositionierung.

Base ID

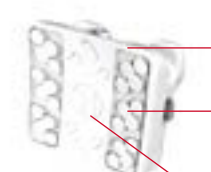

Bracket & Bogen System

Kombinieren Sie EXPERIENCE™ Brackets mit unseren thermoaktiven Initialloy, Bio-Active und Bio-Edge Bögen für hohen Patientenkomfort und Behandlungseffizienz. Zur ästhetischen Ergänzung bieten wir Ihnen die Bögen auch in einer rhodinierten Variante an, dies vollendet den ästhetischen Gesamteindruck des Systems.



Das EXPERIENCE Bracketsystem ist made by TOMY Inc. Japan, einer der führenden Hersteller selbstligierender Brackets seit dem Jahr 2000. EXPERIENCE™ Brackets sind in verschiedenen Techniken verfügbar.

Viele Vorteile in einem Bracket

Das selbstligierende mini Keramikbracket vereint hervorragende Ästhetik mit Funktion. Der rhodinierte Clip fügt sich optimal in das Bracket ein und bietet ein unauffälliges ästhetisches Design, bei voller Slotabdeckung, für optimale Rotationskontrolle. Die mechanische Retention sorgt für optimalen Klebeverbund, speziell abgeschrägte Abnahmekanten ermöglichen ein einfaches und sicheres Debonding ohne Splintern und Brechen.

99-12GT-1300 · Rev00-06/2019



Since 1921
Towards Century of Health

GC Orthodontics Europe GmbH

Harkortstraße 2 · 58339 Breckerfeld · Germany
Tel +49.2338.801.888 · info.gco.germany@gc.dental