


Informationen für den behandelnden Arzt

Die EXPERIENCE mini und mini Rhodium Brackets minimieren in der Nivelierungsphase die Friktion und erlauben eine gute Torque- und Rotationskontrolle in der Finishingphase. Alle Slots der EXPERIENCE Bracketssysteme werden computergesteuert im CNC Verfahren nachgefräst. Somit übertragen alle EXPERIENCE Slots die Torque- und Angulationswerte präzise für ein vorhersehbares Resultat.

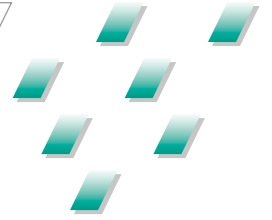

Eigenschaften der selbstligierenden Brackets

- Erhöhter Patientenkomfort
- Reduzierte Stuhlzeit
- Weniger Behandlungstermine notwendig
- Verkürzte Behandlungszeit
- Verbesserte Mundhygiene

SL Product

Rh Rhodium

EXPERIENCE™

mini metal

Rhodium

Selbstligierende Low-Profile Metallbrackets



Mit Rhodium



Ohne Rhodium



passiv



interaktiv



aktiv



Experts in Orthodontics

GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu


EXPERIENCE™ mini metal Rhodium

Optionale verformbare
lasergeschweißte Häkchen

robuster Clip
für sicheres Öffnen
ohne Clip-Deformation


Metall-Spritzguss
für Gleichmäßigkeit,
Stabilität und Präzision

Längsachsenmarkierung
für exakte Bracketplatzierung

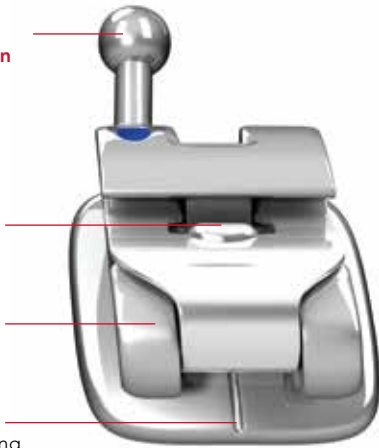

CNC gefräster Slot

Abgerundete Slotwände
für bogenschonende
unterbrechungsfreie
Bewegung

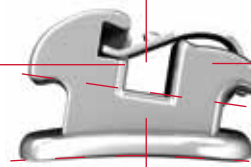

Torque in der Basis

Reduzierte okklusale Bracketflügelhöhe
entwickelt um
Interferenzen
zu reduzieren

Base ID
zur einfachen
Identifizierung



Anatomisch gewölbte Basis
für eine optimale
Passform

Mikrosandgestrahlte 80 Gauge Netzbasis
für optimale Klebekraft

Merkmale des mini Systems

- flaches Profil
- mehr Ästhetik
- reduzierte Größe
- verbessert den Patientenkomfort
- volle Slotabdeckung für optimale Rotationskontrolle

Vorteile der Rhodinierung

- uneingeschränkte Funktionalität
- hohe Patientenzufriedenheit durch Unauffälligkeit
- volle Zuverlässigkeit eines Metallbrackets bei annähernder Ästhetik eines Keramikbrackets

Bracket & Bogen System

Kombinieren Sie EXPERIENCE Brackets mit unseren thermoaktiven Initialloy, Bio-Active und Bio-Edge Bögen für hohen Patientenkomfort und Behandlungseffizienz. Zur ästhetischen Ergänzung bieten wir Ihnen die Bögen auch in einer rhodinierten Variante an, dies vollendet den ästhetischen Gesamteindruck des Systems.

Das EXPERIENCE Bracketsystem ist made by TOMY Inc. Japan, einer der führenden Hersteller selbstligierender Brackets seit dem Jahr 2000. EXPERIENCE Metall Brackets sind in zwei Größen und Varianten sowie in verschiedenen Techniken verfügbar: Standard oder mini Metall, jeweils rhodiniert oder ohne Oberflächenveredelung.



99-2JGT-1300 - Rev04-05/2019



Since 1921
Towards Century of Health

GC Orthodontics Europe GmbH

Harkortstraße 2 · 58339 Breckerfeld · Germany
Tel +49.2338.801.888 · info.gco.germany@gc.dental