


# LEGEND LP Tube



Tubes à coller au **profil plat** et  
**base anatomique microsablée**

# LEGEND LP Tube

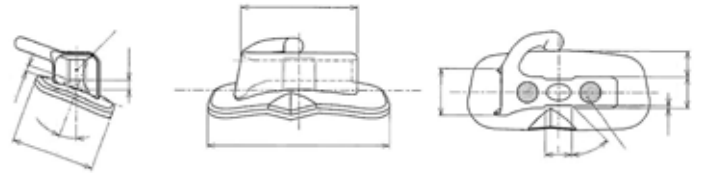

Legend LP Tube est le dernier né des tubes à coller fabriqué par TOMY. Son entrée large et ses bords chanfreinés, facilite l'insertion de l'arc. Les encoches en gingival et en occlusal du tube assurent une bonne prise pour le positionnement. Il reprend aussi les caractéristiques qui font le succès des tubes TOMY tels que la base anatomique qui suit la courbe de la dent, le "V" du sillon de la couronne, un point de couleur pour l'identification du quadrant et sa base micro-sablée en treillis de taille 80 pour une bonne rétention. Son profil plat et son crochet surbaissé, positionné mésialement, favorise le confort du patient.

**Marquage du cadrant**  
évite les inversions

**Grille micro-sablée** taille 80,  
rétention idéale

**Base anatomique**  
marquage du sillon  
de la dent

**Encoche de préhension**  
facilite son positionnement

**Entrée Chanfreinée**  
facilite l'insertion de l'arc

**Crochet soudé au laser**  
en position mésiale  
facilite l'accroche des  
élastiques

Upper  
Lower  
R L  
Offset 10°  
Offset 0°

	Torque (Deg.)	Offset (Deg.)	D/G	Référence	
				.018"x.025"	.022"x.028"
Sup. 6	-14°	10°	D	40-1160-0106	40-2160-0106
			G	40-1260-0106	40-2260-0106
Sup. 6	-14°	0°	D	40-1160-0107	40-2160-0107
			G	40-1260-0107	40-2260-0107
Sup. 7	-14°	10°	D	40-1170-0106	40-2170-0106
			G	40-1270-0106	40-2270-0106
Sup. 7	-14°	0°	D	40-1170-0107	40-2170-0107
			G	40-1270-0107	40-2270-0107
Inf. 6	-20°	0°	D	40-1460-0106	40-2460-0106
			G	40-1360-0106	40-2360-0106
Inf. 7	-10°	0°	D	40-1470-0106	40-2470-0106
			G	40-1370-0106	40-2370-0106

Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Réservé aux professionnels de santé. Lire attentivement la notice ou les indications sur l'étiquette avant utilisation.

**GC Orthodontics Europe GmbH**  
Harkortstrasse 2  
D-58339 Breckerfeld  
Germany

Direction commerciale  
8, rue Benjamin Franklin  
F-94370 - Sucy en Brie  
Tél.: 01 77 45 65 61  
Fax: 01 45 76 31 53  
info-fr@gcorthodontics.eu  
www.gcorthodontics.eu